

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
32903—  
2014

---

## ПРОДУКЦИЯ СОКОВАЯ

Определение водорастворимых витаминов:  
тиамина (В<sub>1</sub>), рибофлавина (В<sub>2</sub>), пиридоксина (В<sub>6</sub>) и  
никотинамида (РР) методом обращенно-фазовой  
высокоэффективной жидкостной хроматографии

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Российский союз производителей соков» (РСПС) при участии закрытого акционерного общества «Мултон» (ЗАО «Мултон»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. № 72-П)

За принятие голосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. № 1716-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32903—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

## ПРОДУКЦИЯ СОКОВАЯ

**Определение водорастворимых витаминов: тиамина (В<sub>1</sub>), рибофлавина (В<sub>2</sub>), пиридоксина (В<sub>6</sub>) и никотинамида (РР) методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии**

Juice products. Determination of water-soluble vitamins: thiamine (vitamin В<sub>1</sub>), riboflavin (vitamin В<sub>2</sub>), pyridoxine (vitamin В<sub>6</sub>) and nicotinamide (vitamin РР) by reversed-phase high performance liquid chromatography (HPLC)

Дата введения — 2016—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на соковую продукцию из фруктов и овощей, обогащенную водорастворимыми витаминами В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, РР, и устанавливает следующие методы обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее – ОФ-ВЭЖХ) для определения массовой концентрации или массовой доли (далее – содержания) водорастворимых витаминов в ней:

- со спектрофотометрическим детектированием для определения содержания тиамина (В<sub>1</sub>), пиридоксина (В<sub>6</sub>) и никотинамида (ниацинамида, РР) – метод А.

Диапазоны измерения содержания тиамина (В<sub>1</sub>) от 1 до 30 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>), пиридоксина (В<sub>6</sub>) от 1 до 20 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>), никотинамида (РР) от 6 до 200 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>);

- с постколоночной дериватизацией и флуориметрическим детектированием для определения массовой концентрации (массовой доли) тиамина (В<sub>1</sub>) – метод Б.

Диапазон измерения содержания тиамина (В<sub>1</sub>) от 1 до 30 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>);

- с постколоночной дериватизацией и флуориметрическим детектированием для определения содержания рибофлавина (В<sub>2</sub>) и пиридоксина (В<sub>6</sub>) – метод В.

Диапазоны измерения содержания витамина В<sub>2</sub> от 1 до 30 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>), витамина В<sub>6</sub> от 1 до 20 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>).

Методы могут применяться в том числе для поливитаминных и витаминно-минеральных премиксов, применяемых при обогащении соковой продукции.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019–79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты\*

ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 245–76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия

ГОСТ 1770–74 (ИСО 1042–83, ИСО 4788–80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ ISO 3696–2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний\*\*

ГОСТ 4198–75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия

ГОСТ 4206–75 Реактивы. Калий железосинеродистый. Технические условия

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019–2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

\*\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501–2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».



ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений\*

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике\*\*

ГОСТ 6552-80 Кислота фосфорная. Технические условия

ГОСТ 9245-79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные. Типы. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб

ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31643-2012 Продукция соковая. Определение аскорбиновой кислоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

**Примечание** – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

**3.1 водорастворимые витамины:** Группа низкомолекулярных органических соединений, растворимых в воде, являющихся катализаторами химических реакций, протекающих в живой клетке, и участвующих в обмене веществ преимущественно в соединении со специфическими белками в составе ферментных систем, поступающих в организм в составе ферментов и коферментов.

**Примечание** – Структурные формулы (в форме оснований) водорастворимых витаминов приведены в приложении А.

### 4 Отбор и подготовка проб

4.1 Отбор проб – по ГОСТ 26313.

4.2 Подготовка проб – по ГОСТ 31643 (раздел 6.2).

4.3 Витаминные смеси (премиксы) разводят водой в таком массовом соотношении, чтобы значение массовой доли витаминов не превышало верхней границы диапазона измерений метода.

При расчете учитывают коэффициент разбавления.

4.4 Срок хранения подготовленных проб в холодильнике при температуре  $(4 \pm 2) ^\circ\text{C}$  – не более 2 ч.

### 5 Условия проведения определений

При подготовке к проведению и проведении определений соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха .....  $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ;

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений».

\*\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике».

- атмосферное давление ..... (97 ± 10) кПа;
- относительная влажность ..... от 40 % до 90 %;
- напряжение в питающей сети ..... (220 ± 20) В;
- частота тока в питающей сети ..... (50 ± 1) Гц.

Помещение, в котором проводят работы с реактивами, должно быть обеспечено приточно-вытяжной вентиляцией.

Все операции с реактивами следует проводить в вытяжном шкафу.

## 6 Метод определения содержания витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>6</sub> и РР с помощью обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектором (метод А)

### 6.1 Сущность метода

Метод основан на разделении группы водорастворимых витаминов на твердом носителе С<sub>18</sub>, привитом на высокочистую силикагелевую основу и дополнительными полярными группами с короткой цепочкой (изопропил) по обращенно-фазовому механизму.

Идентификацию и количественный расчет пиков разделенных витаминов проводят при индивидуальных максимумах светопоглощения в ультрафиолетовой области спектра сопоставлением со временем удерживания пиков в градуировочных растворах.

Т а б л и ц а 1 – Параметры идентификации витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>6</sub> и РР

Витамин	Время удерживания, мин	Длина волны λ, нм, при максимуме светопоглощения
Тиамин (В <sub>1</sub> )	3,7 ± 0,2	245 ± 2
Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	5,7 ± 0,3	290 ± 2
Никотинамид (РР)	7,0 ± 0,4	261 ± 2

П р и м е ч а н и е – При определении витамина В<sub>1</sub> необходимо принимать во внимание матричное влияние сахаров и кислот. Для учета матричного влияния кислот и сахаров приготовление градуировочных растворов проводят с использованием матричного раствора (см. приложение Б). Содержание данных компонентов, на порядок превышающее содержание витамина В<sub>1</sub>, приводит к смещению максимума поглощения последнего в область 254–264 нм. В большинстве случаев максимум поглощения витамина В<sub>1</sub> под влиянием кислот и сахаров обнаруживается при 256,2 нм (см. приложение В).

### 6.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы

Хроматограф жидкостной с насосом высокого давления, спектрофотометрическим детектором, позволяющим проводить измерения оптической плотности с программируемой длиной волны в диапазоне 190–600 нм и характеристиками, указанными в таблице 2, или диодноматричным детектором, позволяющим проводить измерения оптической плотности на нескольких длинах волн в диапазоне от 190 до 800 нм, и характеристиками, указанными в таблице 3.

Т а б л и ц а 2 – Рекомендуемые технические и метрологические характеристики для спектрофотометрического детектора

Технические характеристики при 254 нм			Метрологические характеристики			
			Относительное среднеквадратическое отклонение, %			
уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, не более	дрейф нулевого сигнала, не более	предел детектирования по фенолу, не более	по площади пика, не более	по высоте пика, не более	по времени удерживания, не более	по площади пика за 8 ч непрерывной работы, не более
1,5·10 <sup>-5</sup> е. о. п.	5·10 <sup>-4</sup> е. о. п./ч	7·10 <sup>-10</sup> г/см <sup>3</sup>	5	5	1	4



Т а б л и ц а 3 – Рекомендуемые технические и метрологические характеристики для диодноматричного детектора

Технические характеристики при 254 нм			Метрологические характеристики			
			Относительное средне-квадратическое отклонение выходного сигнала, %		Относительное изменение выходного сигнала за 8 ч непрерывной работы, %	
уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, не более	дрейф нулевого сигнала, не более	предел детектирования по антрацену, не более	по времени удерживания, не более	по площади пика, не более	по времени удерживания, не более	по площади пика, не более
$3 \cdot 10^{-5}$ е. о. п.	$1,5 \cdot 10^{-3}$ е. о. п./ч	$2 \cdot 10^{-9}$ г/см <sup>3</sup>	2	2	4	4

Колонка хроматографическая для ВЭЖХ длиной 250 мм и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная обращенной фазой – октадецилсиликагелем C<sub>18</sub> с размером частиц 1,8–5,0 мкм, содержащим на концах привитые гидрофильные группы, обеспечивающая эффективность разделения в отношении витаминов (см. приложение Г).\*

Компьютер с установленным программным обеспечением для управления хроматографом и обработки результатов измерений.

pH-метр с погрешностью измерений не более 0,05 ед. pH, комбинированным стеклянным электродом по ГОСТ 9245.

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности с наибольшим пределом взвешивания 150 г, пределом допускаемой абсолютной погрешности ± 0,0005 г.

Дозаторы пипеточные одноканальные переменной вместимости от 100 до 1000 мм<sup>3</sup> с допустимой относительной погрешностью дозирования ± 2 % по воде с соответствующими наконечниками по ГОСТ 28311.

Пипетки градуированные 1-2-2-2, 1-2-2-5, 1-2-2-10 и 1-2-2-25 по ГОСТ 29227.

Колбы мерные 2а-50-2, 2а-100-2, 2а-200-2, 2а-250-2 и 2а-1000-2 по ГОСТ 1770.

Цилиндры мерные 1-100-2 и 1-500-2 по ГОСТ 1770.

Стаканы В-1-100, В-1-200 и Н-1-2000 по ГОСТ 25336.

Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336.

Фильтры мембранные с диаметром пор 0,20 и 0,45 мкм для фильтрации подвижной фазы и проб.

Установка лабораторная для вакуумной фильтрации жидкостей с мининасосом.

Флаконы стеклянные для проб вместимостью 4 см<sup>3</sup> со вставками, с завинчивающимися крышками и тефлоновыми прокладками.

Шприц медицинский вместимостью 5 см<sup>3</sup>.

Микрошприцы с ценой деления 1 мм<sup>3</sup> и пределом СКО случайной составляющей погрешности не более 2 %.

Центрифуга настольная с относительным центробежным ускорением ротора не менее 1000 g, снабженная адаптерами для пробирок вместимостью 15 см<sup>3</sup>.

Пробирки полимерные центрифужные с завинчивающейся крышкой вместимостью 15 см<sup>3</sup>.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Тиамин гидрохлорид C<sub>12</sub>H<sub>17</sub>N<sub>4</sub>OS с массовой долей основного вещества не менее 99 %.

Пиридоксин гидрохлорид C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>3</sub> с массовой долей основного вещества не менее 99,5 %.

Никотинамид C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O, с содержанием основного вещества не менее 99,5 %.

Калия гидроксид по ГОСТ 24363, ч. д. а.

Ацетонитрил для градиентной ВЭЖХ с массовой долей основного вещества не менее 99,9 %.

Натрий фосфорнокислый однозамещенный (дигидрофосфат) по ГОСТ 245, ч. д. а.

Калий фосфорнокислый однозамещенный (дигидрофосфат) KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> по ГОСТ 4198, ч. д. а.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552 с массовой долей основного вещества не менее 98 %, ч. д. а.

Вода для лабораторного анализа по ГОСТ ISO 3696, не ниже 2-й степени чистоты.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не усту-

\* Колонки Thermo Scientific AQUASIL C18 HPLC, RESTEK Pinnacle DB Aqueous C18 и Agilent Zorbax AAA опробованы и обеспечивают необходимое разделение. Данная информация не является рекламой указанных колонок и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

пающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также реактивов, посуды и материалов, по качеству не хуже вышеуказанных.

### 6.3 Подготовка к проведению определений

#### 6.3.1 Подготовка хроматографа к работе

Включение и подготовку прибора к работе, вывод его на режим и выключение по окончании работы выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации.

Перед проведением определений хроматографическую систему кондиционируют подвижной фазой до установления стабильной базовой линии в условиях и порядке, указанных в приложении Д.

После вывода хроматографа на режим записывают в течение одного часа нулевой сигнал на наиболее чувствительной шкале. Дрейф нулевого сигнала принимают равным наибольшему смещению нулевого сигнала в течение одного часа. Полученное значение дрейфа нулевого сигнала не должно превышать значений, указанных в таблице 2 или 3.

**Примечание** – Дрейф базовой линии больше значения, равного наибольшему смещению нулевого сигнала, указывает на проблемы с поддержанием температуры колонки или на вынос полярной фазы из колонки, или все факторы одновременно.

#### 6.3.2 Приготовление раствора гидроксида калия молярной концентрации 5 моль/дм<sup>3</sup>

На лабораторных весах взвешивают  $(56,0 \pm 0,1)$  г гидроксида калия в стакане вместимостью 200 см<sup>3</sup>, растворяют приблизительно в 100 см<sup>3</sup> воды, охлаждают раствор до комнатной температуры при перемешивании стеклянной палочкой, затем переносят в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора до метки водой и перемешивают.

Раствор хранят в полимерной упаковке в течение 1 мес в холодильнике при температуре 10 °С при условии визуального отсутствия нерастворимых веществ.

#### 6.3.3 Приготовление раствора дигидрофосфата калия молярной концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup> и 7 ед. рН

На лабораторных весах взвешивают  $(6,8 \pm 0,1)$  г дигидрофосфата калия в стакане вместимостью 100 см<sup>3</sup>, растворяют в 50 см<sup>3</sup> воды, затем переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доводят объем водой до метки и перемешивают. Раствор выливают в стакан вместимостью 2000 см<sup>3</sup>, опускают в него электрод и при перемешивании на мешалке доводят раствор до  $(7,0 \pm 0,1)$  ед. рН с помощью раствора гидроксида калия молярной концентрации 5 моль/дм<sup>3</sup>, регистрируя показания рН-метра. Полученный раствор фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и дегазируют под вакуумом в течение 15 мин.

Раствор хранят в течение трех дней в холодильнике при температуре 10 °С при условии визуального отсутствия нерастворимых веществ и помутнения.

#### 6.3.4 Приготовление раствора дигидрофосфата калия молярной концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup> и 3 ед. рН

На лабораторных весах взвешивают  $(6,8 \pm 0,1)$  г дигидрофосфата калия в стакане вместимостью 100 см<sup>3</sup>, растворяют в 50 см<sup>3</sup> воды, затем переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор выливают в стакан вместимостью 2000 см<sup>3</sup>, опускают в него электрод и при перемешивании на мешалке доводят раствор до  $(3,0 \pm 0,1)$  ед. рН с помощью ортофосфорной кислоты, регистрируя показания рН-метра. Полученный раствор фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и дегазируют под вакуумом в течение 15 мин.

Раствор хранят в течение трех дней в холодильнике при температуре 10 °С при условии визуального отсутствия нерастворимых веществ и помутнения.

#### 6.3.5 Приготовление градуировочных растворов витаминов

6.3.5.1 Приготовление основного раствора витаминов (в пересчете на основание) массовой концентрации тиамин (витамин В<sub>1</sub>) 30,4 мг/дм<sup>3</sup>, пиридоксин (витамин В<sub>6</sub>) 20,48 мг/дм<sup>3</sup>, никотинамида (витамин РР) 192 мг/дм<sup>3</sup>.

Взвешивают  $(0,0341 \pm 0,0010)$  г гидрохлорида тиамин,  $(0,0249 \pm 0,0010)$  г гидрохлорида пиридоксин,  $(0,1920 \pm 0,0010)$  г никотинамида в стакане вместимостью 100 см<sup>3</sup>, растворяют в 50 см<sup>3</sup> воды, затем переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, добавляют 12,5 см<sup>3</sup> матричного раствора (см. приложение Б), доводят объем раствора до метки водой и перемешивают.

Раствор устойчив в течение семи дней при хранении в холодильнике при температуре не более 4 °С в герметично закрытой колбе.

6.3.5.2 Готовят ряд градуировочных растворов витаминов для построения градуировочной зависимости по пяти уровням, от меньшей массовой концентрации к большей, из основного раствора в соответствии с таблицей 4.



Т а б л и ц а 4 – Приготовление градуировочных растворов для определения витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>6</sub> и РР

№ градуировочного раствора, N	Компоненты	Объем мерной колбы, см <sup>3</sup>	Способ приготовления	Массовая концентрация в полученном растворе (в пересчете на основание) C <sub>гп</sub> , мг/дм <sup>3</sup>
1	Тиамин (В1)	50	В мерную колбу помещают 25 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.5.1, 10 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.4, доводят объем до метки водой и перемешивают	15,20
	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )			10,24
	Никотина-мид (РР)			96,00
2	Тиамин (В1)		В мерную колбу помещают 12,5 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.5.1, 20 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.4, доводят объем до метки водой и перемешивают	7,60
	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )			5,12
	Никотина-мид (РР)			48,00
3	Тиамин (В1)	100	В мерную колбу помещают 12,5 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.5.1, 50 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.4, доводят объем до метки водой и перемешивают	3,80
	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )			2,56
	Никотина-мид (РР)			24,0
4	Тиамин (В1)		В мерную колбу помещают 6,25 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.5.1, 80 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.4, доводят объем до метки водой и перемешивают	1,90
	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )			1,28
	Никотина-мид (РР)			12,0
5	Тиамин (В1)	250	В мерную колбу помещают 7,8 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.5.1, 80 см <sup>3</sup> раствора по 6.3.4, доводят объем до метки водой и перемешивают	0,95
	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )			0,64
	Никотина-мид (РР)			6,00

6.3.5.3 Действительное значение массовой концентрации *i*-го витамина в основном градуировочном растворе C<sub>гп,иск</sub>, мг/дм<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$C_{гп,иск} = \frac{m_i \cdot \varphi \cdot 1000}{100 \cdot V_i}, \quad (1)$$

где  $m_i$  – масса *i*-го витамина введенного в градуировочный раствор, г;  
 $\varphi$  – массовая доля основного вещества в витамине, %;  
 1000 – коэффициент пересчета в миллиграммы;  
 100 – множитель для перехода от процентов к абсолютным значениям;  
 $V_i$  – объем градуировочного раствора, дм<sup>3</sup>.

Рабочие градуировочные растворы готовят непосредственно перед выполнением измерений.

#### 6.4 Порядок проведения определений

##### 6.4.1 Условия хроматографических измерений

Измерения проводят при следующих параметрах:

- температура термостата колонки ..... (25 ± 5) °С;
- объем вводимой пробы ..... 20 мм<sup>3</sup>;
- элюент ..... раствор дигидрофосфата калия (см. 6.3.4);
- режим элюирования ..... в соответствии с таблицей 5.



Т а б л и ц а 5 – Профиль градиента при определении витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> и РР

Время, мин	Скорость потока подачи элюента, см <sup>3</sup> /мин	Состав подвижной фазы (элюента), массовая доля, %	
		Дигидрофосфат калия	Ацетонитрил
0	1,0	96,0	4,0
7		96,0	4,0
8		95,0	5,0
20		80,0	20,0
25		80,0	20,0
26		96,0	4,0
31		96,0	4,0

В зависимости от типа применяемого хроматографа и хроматографической колонки допускается изменение условий измерений, обеспечивающих разделение компонентов пробы, указанное в таблице Г.1 приложения Г.

#### 6.4.2 Построение градуировочной характеристики

Для установления градуировочной характеристики в инжектор хроматографа вводят с помощью микрошприца 20 мм<sup>3</sup> каждого градуировочного раствора в соответствии с таблицей 4.

Для каждого градуировочного раствора выполняют два параллельных измерения в условиях повторяемости. Компоненты идентифицируют по абсолютным значениям времени удерживания.

Вычисляют с помощью компьютерной программы обработки данных или вручную методом наименьших квадратов градуировочные коэффициенты и устанавливают градуировочную характеристику для площади пика каждого витамина в градуировочном растворе

$$\bar{S}_i = a\bar{C}_i + b, \quad (2)$$

где  $\bar{S}_i$  – среднееарифметическое значение площади пика  $i$ -го витамина в  $i$ -ом градуировочном растворе, е. о. п-с;

$\bar{C}_i$  – среднееарифметическое значение массовой концентрации  $i$ -го витамина в  $i$ -том градуировочном растворе, мг/дм<sup>3</sup>;

$a$ ,  $b$  – градуировочные коэффициенты в уравнении прямой, вычисленные методом наименьших квадратов по формулам

$$a = \frac{N \sum_{i=1}^N C_i \cdot S_i - \sum_{i=1}^N C_i \cdot \sum_{i=1}^N S_i}{N \sum_{i=1}^N C_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N C_i \right)^2}, \quad (3)$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^N S_i \cdot \sum_{i=1}^N C_i^2 - \sum_{i=1}^N C_i \sum_{i=1}^N C_i \cdot S_i}{m \sum_{i=1}^N C_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N C_i \right)^2}, \quad (4)$$

где  $C_i$  – массовая концентрация  $i$ -го витамина в  $i$ -ом градуировочном растворе, мг/дм<sup>3</sup>;

$S_i$  – площадь пика  $i$ -го витамина в  $i$ -ом градуировочном растворе, е. о. п-с;

$i$  – индекс переменной;

$N$  – номер градуировочного раствора.

Градуировочную характеристику, вычисленную методом наименьших квадратов, считают приемлемой, если значение квадрата коэффициента корреляции  $R^2$  для каждого витамина составляет не менее 0,990.

Градуировочную характеристику строят заново в случае замены оборудования, колонок, партий реактивов или при выявлении несоответствия метрологическим требованиям результатов контроля стабильности по 6.4.3, но не реже одного раза в месяц.

#### 6.4.3 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят ежедневно перед началом измерений.

Выполняют измерения двух градуировочных растворов, приготовленных по 6.3.5.2, с массовой концентрацией витаминов, близкой к началу и концу диапазона измерений в тех же условиях, в которых была установлена градуировочная характеристика.

Градуировочную характеристику считают стабильной и линейной в случае, если для обоих растворов выполняется условие

$$\frac{|C_{i\text{изм}} - C_{i\text{гр}}|}{C_{i\text{гр}}} \cdot 100 \leq K_{i\text{гр}}, \quad (5)$$

где  $C_{i\text{изм}}$  – значение массовой концентрации  $i$ -го витамина в градуировочном растворе, найденное по градуировочной характеристике, мг/дм<sup>3</sup>;  
 $C_{i\text{гр}}$  – значение массовой концентрации  $i$ -го витамина в градуировочном растворе, установленное при построении градуировочной характеристики, мг/дм<sup>3</sup>;  
 100 – множитель для перехода от абсолютных значений к процентам;  
 $K_{i\text{гр}}$  – норматив контроля  $i$ -го витамина,

$$K_{i\text{гр}} = 0,5 \cdot \delta_i,$$

где  $\pm \delta_i$  – границы относительной погрешности  $i$ -го витамина, % (см. таблицы 6, 11, 14).

Если условие стабильности (5) не выполняется только для одного градуировочного раствора, то выполняют повторное измерение этого раствора с целью исключения результата, содержащего грубую ошибку.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины нестабильности и повторяют контроль стабильности с использованием других растворов для градуировки, предусмотренной методикой. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики прибор градуируют заново.

#### 6.4.4 Проведение измерений

В инжектор хроматографа микрошприцем вводят по 20 мм<sup>3</sup> пробы, подготовленной по 4.2 или 4.3, и проводят измерения в условиях, указанных в 6.4.1.

Регистрируют на хроматограммах пики, соответствующие временам удерживания витаминов, найденных при измерениях градуировочных растворов.

Относительное расхождение времени удерживания идентифицированных витаминов не должно отличаться от времени удерживания витаминов в градуировочном растворе более чем на 5 %. В противном случае измерения повторяют.

Примеры хроматограмм и условия определений содержания конкретных витаминов приведены в приложении В.

Значения площади пика витаминов на хроматограммах используют для вычисления содержания витаминов по 6.4.5 при условии, что они не выходят за верхнюю границу диапазона градуировки хроматографа. В противном случае уменьшают вводимый объем пробы в два раза и проводят ее повторное измерение.

При расчете по 6.4.5 площадь пика умножают в два раза.

#### 6.4.5 Обработка и оформление результатов определений

6.4.5.1 В соответствии с данными, полученными при измерениях градуировочных растворов витаминов, оформляют таблицу пиков с использованием программного обеспечения хроматографа. Обработку хроматограмм проводят методом абсолютной градуировки.

6.4.5.2 Массовую концентрацию  $i$ -го витамина  $C_i$ , мг/дм<sup>3</sup>, в пробе, подготовленной по 4.2, вычисляют по формуле

$$C_i = \frac{(S_i - b)}{k_i} \cdot \frac{V_2}{V_1}, \quad (6)$$

где  $S_i$  – площадь пика  $i$ -го витамина, е. о. п.с;

$b$  – коэффициент в уравнении градуировочной зависимости, е. о. п.с;

$V_2$  – вместимость мерной колбы, взятой для разбавления, см<sup>3</sup>;

$k_i$  – градуировочный коэффициент для  $i$ -го витамина, е. о. п.с. (мг/дм<sup>3</sup>)<sup>-1</sup>;

$V_1$  – объем пробы продукта, подготовленной по разделу 4, см<sup>3</sup>.

6.4.5.3 Для концентрированных продуктов и премиксов, подготовленных по 4.2 и 4.3, массовую долю  $i$ -го витамина  $X_i$ , млн<sup>-1</sup>, вычисляют по формуле

$$X_i = \frac{(S_i - b)}{k_i} \cdot \frac{m_2}{m_1}, \quad (7)$$

где  $m_2$  – масса пробы продукта после разбавления водой, г;

$k_i$  – градуировочный коэффициент для  $i$ -го витамина, е. о. п.с. (млн<sup>-1</sup>)<sup>-1</sup>;

$m_1$  – масса пробы продукта, подготовленной по разделу 4, г.

Все вычисления проводят до третьего десятичного знака.

6.4.5.4 За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, если относительное расхождение между ними при соблюдении условий согласно ГОСТ ИСО 5725-6 (раздел 5) не превышает предела повторяемости (сходимости)  $r_{отн}$ , указанного в таблице 6, при доверительной вероятности  $P = 0,95$  по формуле

$$\frac{2 \cdot |C_{i1} - C_{i2}| \cdot 100}{(C_{i1} + C_{i2})} \leq r \quad \text{или} \quad \frac{2 \cdot |X_{i1} - X_{i2}| \cdot 100}{(X_{i1} + X_{i2})} \leq r, \quad (8)$$

где  $C_{i1}, C_{i2}$  – результаты параллельных определений массовой концентрации  $i$ -го витамина, мг/дм<sup>3</sup>;

100 – множитель для перехода от абсолютных значений к процентам;

$X_{i1}, X_{i2}$  – результаты параллельных определений массовой доли  $i$ -го витамина, млн<sup>-1</sup>;

$r$  – значение предела повторяемости, %, (см. таблицы 6, 11, 14).

6.4.5.5 В случае превышения предела повторяемости  $r_{отн}$  получают еще два результата параллельных определений в полном соответствии с 6.4, 7.4 и 8.4. За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов четырех параллельных определений, если относительное расхождение между ними при соблюдении условий согласно ГОСТ ИСО 5725-6 (раздел 5) не превышает значения критического диапазона

$$\frac{4 \cdot |C_{i, \max} - C_{i, \min}| \cdot 100}{(C_{i1} + C_{i2} + C_{i3} + C_{i4})} \leq CR_{0,95} \quad \text{или} \quad \frac{4 \cdot |X_{i, \max} - X_{i, \min}| \cdot 100}{(X_{i1} + X_{i2} + X_{i3} + X_{i4})} \leq CR_{0,95}, \quad (9)$$

где  $C_{i, \max}, C_{i, \min}$  – максимальное и минимальное значения из полученных четырех ( $C_{i1}, C_{i2}, C_{i3}, C_{i4}$ ) результатов параллельных определений массовой концентрации  $i$ -го витамина, мг/дм<sup>3</sup>;

100 – множитель для перехода от абсолютных значений к процентам;

$X_{i, \max}, X_{i, \min}$  – максимальное и минимальное значения из полученных четырех ( $X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}, X_{i4}$ ) результатов параллельных определений массовой доли  $i$ -го витамина, млн<sup>-1</sup>;

$CR_{0,95}$  – значение критического диапазона для уровня вероятности  $P = 0,95$  и  $n$  результатов параллельных определений,

$$CR_{0,95} = 3,6 \cdot \sigma_{i,r}, \quad \text{при } n = 4,$$

где  $\sigma_{i,r}$  – показатель повторяемости  $i$ -го витамина, % (см. таблицы 6, 11, 14).

6.4.5.6 Если расхождение полученных четырех результатов параллельных определений больше  $CR_{0,95}$  (4), то в качестве окончательного результата принимают медиану четырех результатов параллельных определений. Затем целесообразно приостановить определения для выяснения причин превышения критического диапазона.

6.4.5.7 Окончательные результаты определений в документах, предусматривающих их использование, представляют согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025 с указанием метода определения и настоящего стандарта в виде

$$\bar{C} \pm 0,01 \cdot \delta \cdot \bar{C} \quad \text{или} \quad \bar{X} \pm 0,01 \cdot \delta \cdot \bar{X} \quad \text{при } P = 0,95,$$

где  $\bar{C}, \bar{X}$  – среднеарифметическое значение результатов  $n$  параллельных определений  $i$ -го витамина, признанных приемлемыми по 6.4.5.4, мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>);

$\delta_i$  – границы относительной погрешности измерений  $i$ -го витамина, %, (см. таблицы 6, 11, 14).

В случае, если окончательный результат определения витаминов выходит за пределы границ диапазона измерений, то приводят следующую запись: «Массовая концентрация (массовая доля) тиамина (В1) менее 1 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>)», или «Массовая концентрация (массовая доля) пиридоксина (В6) менее 1 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>)», или «Массовая концентрация (массовая доля) никотинамида (РР) менее 6 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>)».

Числовое значение результата определения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение границы относительной погрешности, выраженное числом, содержащим не более двух значащих цифр.

#### 6.4.6 Метрологические характеристики

При соблюдении всех условий проведения определения метод обеспечивает получение ре-



зультатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 – Основные метрологические характеристики метода А

Витамин	Диапазон измерений массовой концентрации (массовой доли), мг/дм <sup>3</sup> (млн <sup>-1</sup> )	Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm \delta$ , % при $P = 0,95$	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) $\sigma_r$ , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) $\sigma_R$ , %	Предел повторяемости $r$ , %, при $P = 0,95$ , $l = 2$
Тиамин (В <sub>1</sub> )	От 1,0 до 10,0 включ.	25	5	8	14
	Св. 10 до 30 включ.	13	2,5	4	7
Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	От 1,0 до 10,0 включ.	28	6	10	17
	Св. 10 до 20 включ.	15	3	5	8
Никотинамид (РР)	От 6 до 100 включ.	25	5	8	14
	Св. 100 до 200 включ.	13	2,5	4	7

П р и м е ч а н и е – Показатели прецизионности и точности метода были установлены при круговом межлабораторном испытании, проведенном в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-2 (пункт 7.5) и ГОСТ ИСО 5725-6 (пункт 4.2).

## 7 Метод определения содержания витамина В<sub>1</sub> с помощью обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии с постколоночной дериватизацией и флуориметрическим детектором (метод Б)

### 7.1 Сущность метода

Метод основан на хроматографическом процессе, описанном в 6.1.

Идентификацию и количественный расчет массовой концентрации (массовой доли) водорастворимого витамина В<sub>1</sub> проводят при максимумах длины волны излучения, индивидуального для данного витамина (см. таблицу 7).

Т а б л и ц а 7 – Параметры идентификации витамина В<sub>1</sub>

Наименование витамина	Ориентировочное время удерживания, мин	Длина волны $\lambda$ , нм, при максимуме светоиспускания	Длина волны возбуждения $\lambda_{ex}$ , нм	Длина волны излучения $\lambda_{em}$ , нм
Тиамин (В <sub>1</sub> )	5,05 $\pm$ 0,25	435 $\pm$ 2	375 $\pm$ 2	435 $\pm$ 2

Идентификацию витамина проводят по времени удерживания сопоставлением со временем его удерживания в градуировочных растворах.

### 7.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы

Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы – по 6.2 со следующим дополнением.

Хроматограф жидкостной с насосом высокого давления, многоволновым флуориметрическим детектором, позволяющим проводить измерения в диапазоне длин волн возбуждения-эмиссии 200–900 нм с характеристиками, не хуже указанных в таблице 8.

Т а б л и ц а 8 – Рекомендуемые технические и метрологические характеристики для флюориметрического детектора

Технические характеристики			Метрологические характеристики			
			Относительное средне-квадратичное отклонение выходных сигналов, %		Относительное изменение выходного сигнала за 8 ч непрерывной работы, %	
уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, не более	дрейф нулевого сигнала, не более	предел детектирования по антрацену, не более	по времени удерживания, не более	по площади пика, не более	по времени удерживания, не более	по площади пика, не более
$2,5 \cdot 10^{-5}$ о. е. ф.	$8 \cdot 10^{-5}$ о. е. ф./ч	$1 \cdot 10^{-12}$ г/см <sup>3</sup>	0,5	4	4	4

Система постколоночной дериватизации, интегрированная в систему высокоэффективной жидкостной хроматографии, состоящая:

- из насоса для подачи дериватизирующего реагента;
- реакционного модуля для постколоночной дериватизации;
- температурного контроллера.

Калий железосинеродистый  $K_3Fe(CN)_6$  по ГОСТ 4206, х. ч.

### 7.3 Подготовка к проведению определений

#### 7.3.1 Подготовка хроматографа к работе

Подготовка хроматографа к работе – по 6.3.1.

#### 7.3.2 Приготовление раствора дигидрофосфата калия молярной концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup> и 3 ед. рН

Выполняют согласно 6.3.4.

#### 7.3.3 Приготовление раствора гидроксида калия молярной концентрации 3 моль/дм<sup>3</sup>

На лабораторных весах взвешивают  $(42,0 \pm 0,1)$  г гидроксида калия в стакане вместимостью 200 см<sup>3</sup>, растворяют в 100 см<sup>3</sup> воды, затем охлаждают до комнатной температуры при перемешивании стеклянной палочкой и переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.

Раствор хранят в полимерной емкости в течение одного месяца при комнатной температуре при условии визуального отсутствия нерастворимых веществ.

#### 7.3.4 Приготовление раствора железосинеродистого калия $K_3Fe(CN)_6$ в растворе гидроксида калия массовой долей 0,06 %

На лабораторных весах взвешивают  $(0,15 \pm 0,10)$  г железосинеродистого калия  $K_3Fe(CN)_6$  в стакане вместимостью 100 см<sup>3</sup>, растворяют в 50 см<sup>3</sup> раствора гидроксида калия по 7.3.3, затем переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доводят раствором гидроксида калия до метки и перемешивают.

Раствор хранят в полимерной емкости в течение одного месяца при комнатной температуре при условии визуального отсутствия нерастворимых веществ.

#### 7.3.5 Приготовление градуировочных растворов

##### 7.3.5.1 Приготовление основного раствора тиамин (витамин В<sub>1</sub>) массовой концентрации 30,4 мг/дм<sup>3</sup>

На лабораторных весах взвешивают  $(0,0341 \pm 0,0010)$  г гидрохлорида тиамин в стакане вместимостью 100 см<sup>3</sup>, растворяют в 50 см<sup>3</sup> воды, затем переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора до метки водой и перемешивают.

Раствор устойчив в течение семи дней при хранении в холодильнике при температуре не более 4 °С в герметично закрытой емкости.

7.3.5.2 Готовят ряд градуировочных растворов витамина В<sub>1</sub> для построения градуировочной зависимости по пяти уровням, от меньшей массовой концентрации к большей, из основного раствора в соответствии с таблицей 9.

Т а б л и ц а 9 – Приготовление градуировочных растворов для определения витамина В<sub>1</sub>

№ градуировочного раствора, N	Компонент	Объем мерной колбы, см <sup>3</sup>	Способ приготовления	Массовая концентрация в полученном растворе (в пересчете на основании) C <sub>гр.</sub> , мг/дм <sup>3</sup>
1	Тиамин (В <sub>1</sub> )	50	В мерную колбу помещают 25 см <sup>3</sup> раствора по 7.3.5.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	1,500
2			В мерную колбу помещают 12,5 см <sup>3</sup> раствора по 7.3.5.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	0,750
3			В мерную колбу помещают 6,25 см <sup>3</sup> раствора по 7.3.5.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	0,375
4			В мерную колбу помещают 1,25 см <sup>3</sup> раствора по 7.3.5.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	0,075
5			В мерную колбу помещают 0,25 см <sup>3</sup> раствора по 7.3.5.1, доводят объем до метки до метки водой и перемешивают	0,015

Действительное значение массовой концентрации витамина В<sub>1</sub> в основном градуировочном растворе C<sub>диск.</sub>, мг/дм<sup>3</sup>, вычисляют по (1).

Градуировочные растворы готовят непосредственно перед выполнением измерений.

#### 7.4 Порядок поведения определений

##### 7.4.1 Условия хроматографических измерений

Измерения проводят при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха ..... (25 ± 5) °С;
- рабочий диапазон длин волн для флуориметрического детектора ..... в соответствии с таблицей 8;
- объем вводимой пробы ..... 20 мм<sup>3</sup>;
- элюент ..... раствор дигидрофосфата калия (см. 7.3.4);
- режим элюирования ..... в соответствии с таблицей 10;
- скорость подачи реагента ..... 0,2 см<sup>3</sup>/мин;
- время истечения реагента ..... 5 мин\*

Т а б л и ц а 10 – Профиль градиента при определении витамина В<sub>1</sub>

Время, мин	Скорость потока подачи элюента, см <sup>3</sup> /мин	Состав подвижной фазы (элюента), массовая доля, %	
		Дигидрофосфат калия	Ацетонитрил
0	1,0	96,0	4,0
7		96,0	4,0
8		95,0	5,0
20		80,0	20,0
25		80,0	20,0
26		96,0	4,0
31		96,0	4,0

В зависимости от типа применяемого хроматографа и хроматографической колонки допускается изменение условий измерений, обеспечивающих разделение компонентов пробы, указанное таблице Г.2 приложения Г.

7.4.2 Построение градуировочной зависимости – по 6.4.2.

7.4.3 Контроль стабильности градуировочной характеристики – по 6.4.3.

\* Время подачи дериватизирующего реагента от момента ввода пробы (без учета времени заполнения реагентом реакционного модуля) до максимальной точки выхода хроматографического пика. Данная величина используется для отключения подачи дериватизирующего реагента.



## 7.4.4 Проведение измерений – по 6.4.4.

Примеры хроматограмм и условия определения приведены в приложении В.

## 7.4.5 Обработка и оформление результатов определений

Результаты измерений витамина В<sub>1</sub> представляют согласно 6.4.5.

В случае, если окончательный результат определения выходит за пределы границ диапазона измерений, то приводят следующую запись: «Массовая концентрация (массовая доля) тиамин (В<sub>1</sub>) менее 1 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>)».

Числовое значение результата определения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение границы относительной погрешности, выраженное числом, содержащим не более двух значащих цифр.

## 7.4.6 Метрологические характеристики

При соблюдении всех условий проведения определения метод обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 11.

Т а б л и ц а 11 – Основные метрологические характеристики метода Б

Витамин	Диапазон измерений массовой концентрации (массовой доли), мг/дм <sup>3</sup> (млн <sup>-1</sup> )	Показатель точности (границы относительной погрешности) ± δ, % при P = 0,95	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ <sub>v</sub> , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) σ <sub>R</sub> , %	Предел повторяемости r, %, при P = 0,95, n = 2
Тиамин (В <sub>1</sub> )	От 1,0 до 10 включ.	28	6	10	17
	Св. 10 до 30 включ.	15	3	5	8

П р и м е ч а н и е – Показатели прецизионности и точности метода были установлены при круговом межлабораторном испытании, проведенном в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-2 (пункт 7.5) и ГОСТ ИСО 5725-8 (пункт 4.2).

## 8 Метод определения содержания витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub> с помощью обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектором (метод В)

## 8.1 Сущность метода

Метод основан на хроматографическом разделении, описанном в 6.1.

Детектирование, идентификацию и количественный расчет массовой концентрации (массовой доли) водорастворимых витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub> проводят при максимуме длины волны излучения, индивидуальном для каждого витамина (см. таблицу 12).

Т а б л и ц а 12 – Параметры идентификации витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub>

Наименование витамина	Ориентировочное время удерживания, мин	Длина волны λ, нм при максимуме светоиспускания	Длина волны возбуждения, λ <sub>exc</sub> , нм	Длина волны излучения, λ <sub>em</sub> , нм
Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	5,00 ± 0,25	395 ± 2	290 ± 2	395 ± 2
Рибофлавин (В <sub>2</sub> )	24,00 ± 1,20	521 ± 2	450 ± 2	521 ± 2

## 8.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы

Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы – по 6.2 со следующим дополнением.

Хроматограф жидкостный с насосом высокого давления, техническими и метрологическими характеристиками флуориметрического детектора не хуже указанных в таблице 10.

Рибофлавин гидрохлорид С<sub>17</sub>Н<sub>20</sub>Н<sub>4</sub>О<sub>6</sub> с содержанием основного вещества не менее 99,5 %.

### 8.3 Подготовка к проведению определений

#### 8.3.1 Подготовка хроматографа к работе

Подготовка хроматографа к работе – по 6.3.1.

#### 8.3.2 Приготовление раствора дигидрофосфата калия молярной концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup> и 3 ед. рН

Выполняют согласно 6.3.4.

#### 8.3.3 Приготовление градуировочных растворов витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub>

8.3.3.1 Приготовление основного раствора витаминов (в пересчете на основание) с массовой концентрацией рибофлавина (витамин В<sub>2</sub>) 4,0 мг/дм<sup>3</sup>, пиридоксина (витамин В<sub>6</sub>) 8,0 мг/дм<sup>3</sup>.

Взвешивают (0,0097 ± 0,0010) г гидрохлорида пиридоксина и (0,0040 ± 0,0010) г гидрохлорида рибофлавина в стакане вместимостью 100 см<sup>3</sup>, растворяют в 50 см<sup>3</sup> воды, затем переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора до метки водой и перемешивают.

Раствор устойчив в течение семи дней при хранении в холодильнике при температуре не более 4 °С в герметично закрытой колбе.

8.3.3.2 Готовят ряд градуировочных растворов витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub> для построения градуировочной зависимости по пяти уровням, от меньшей массовой концентрации к большей, из основного градуировочного раствора в соответствии с таблицей 13.

Т а б л и ц а 13 – Приготовление градуировочных растворов для определения витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub>

№ градуировочного раствора, N	Компонент	Объем мерной колбы, см <sup>3</sup>	Способ приготовления	Массовая концентрация в полученном растворе (в пересчете на основание) С <sub>гп</sub> , мг/дм <sup>3</sup>
1	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	50	В мерную колбу помещают 25 см <sup>3</sup> раствора по 8.3.3.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	4,00
	Рибофлавин (В <sub>2</sub> )			2,00
2	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	50	В мерную колбу помещают 12,5 см <sup>3</sup> раствора по 8.3.3.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	2,00
	Рибофлавин (В <sub>2</sub> )			1,00
3	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	100	В мерную колбу помещают 12,5 см <sup>3</sup> раствора по 8.3.3.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	1,00
	Рибофлавин (В <sub>2</sub> )			0,50
4	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	100	В мерную колбу помещают 6,25 см <sup>3</sup> раствора по 8.3.3.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	0,50
	Рибофлавин (В <sub>2</sub> )			0,25
5	Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	100	В мерную колбу помещают 1,25 см <sup>3</sup> раствора по 8.3.3.1, доводят объем до метки водой и перемешивают	0,10
	Рибофлавин (В <sub>2</sub> )			0,05

Действительное значение массовой концентрации витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub> в основном градуировочном растворе С<sub>д,исх.</sub>, мг/дм<sup>3</sup> вычисляют по (1).

Градуировочные растворы готовят непосредственно перед выполнением измерений.

### 8.4 Порядок проведения определений

#### 8.4.1 Условия хроматографических измерений

Измерения проводят при следующих условиях:

- температура колонки .....(25 ± 5) °С;
- рабочий диапазон длин волн для флуориметрического детектора .....в соответствии с таблицей 12;
- объем вводимой пробы .....20 мм<sup>3</sup>;
- элюент.....раствор дигидрофосфата калия по 6.3.4;

- режим элюирования ..... в соответствии с таблицей 14.

Т а б л и ц а 14 – Профиль градиента при определении витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub>

Время, мин	Скорость потока подачи элюента, см <sup>3</sup> /мин	Состав подвижной фазы (элюента), массовая доля, %	
		Дигидрофосфат калия	Ацетонитрил
0	1,0	96,0	4,0
7		96,0	4,0
8		95,0	5,0
20		80,0	20,0
25		80,0	20,0
26		96,0	4,0
31		96,0	4,0

В зависимости от типа применяемого хроматографа и хроматографической колонки допускается использование других условий измерений, обеспечивающих разделение компонентов пробы, указанное в таблице Г.3 приложения Г.

8.4.2 Построение градуировочной зависимости – по 6.4.2.

8.4.3 Контроль стабильности градуировочной характеристики – по 6.4.3.

8.4.4 Проведение измерений – по 6.4.4.

Примеры хроматограмм и условия определения приведены в приложении В.

#### 8.4.5 Обработка и оформление результатов определений

Результаты определений витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub> представляют согласно 6.4.5.

В случае, если окончательный результат определения выходит за пределы границ диапазона измерений, то приводят следующую запись: «Массовая концентрация (массовая доля) рибофлавина (В<sub>2</sub>) менее 1 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>)» или «Массовая концентрация (массовая доля) пиридоксина (В<sub>6</sub>) менее 1 мг/дм<sup>3</sup> (млн<sup>-1</sup>)».

Числовое значение результата определения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение границы относительной погрешности, выраженное числом, содержащим не более двух значащих цифр.

#### 8.4.6 Метрологические характеристики

При соблюдении всех условий проведения определения метод обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 15.

Т а б л и ц а 15 – Основные метрологические характеристики метода В

Витамин	Диапазон измерений массовой концентрации (массовой доли) <sub>3</sub> мг/дм <sup>3</sup> (млн <sup>-1</sup> )	Показатель точности (границы относительной погрешности) ± δ, % при P = 0,95	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ <sub>r</sub> , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) σ <sub>R</sub> , %	Предел повторяемости r, %, при P = 0,95, n = 2
Рибофлавин (В <sub>2</sub> )	От 1,0 до 30 включ.	20,0	3,0	5,0	10,0
Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	От 1,0 до 20 включ.	20,0	2,0	3,0	5,5

П р и м е ч а н и е – Показатели прецизионности и точности метода были установлены при круговом межлабораторном испытании, проведенном в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-2 (пункт 7.5) и ГОСТ ИСО 5725-8 (пункт 4.2).

## 9 Проверка приемлемости результатов определений, полученных в условиях воспроизводимости

9.1 Проверку приемлемости результатов параллельных определений в условиях воспроизводимости проводят:

- при возникновении спорных ситуаций между двумя лабораториями;
- проверке совместимости результатов измерений, полученных при сличительных испытаниях.

9.2 Для проведения проверки приемлемости результатов параллельных определений в условиях воспроизводимости каждая лаборатория использует пробы, оставленные на хранение.



Приемлемость результатов параллельных определений, полученных в двух лабораториях, оценивают сравнением разности этих результатов с критической разностью  $CD_{0,95}$  по формуле

$$\frac{2 \cdot |C_{cp1} - C_{cp2}| \cdot 100}{(C_{cp1} + C_{cp2})} \leq CD_{0,95} \text{ или } \frac{2 \cdot |X_{cp1} - X_{cp2}| \cdot 100}{(X_{cp1} + X_{cp2})} \leq CD_{0,95}, \quad (10)$$

где  $C_{cp1}$ ,  $C_{cp2}$  – среднеарифметические значения массовой концентрации  $i$ -го витамина, полученные в первой и второй лабораториях, мг/дм<sup>3</sup>;

$X_{cp1}$ ,  $X_{cp2}$  – среднеарифметические значения массовой доли  $i$ -го витамина, полученные в первой и второй лабораториях, млн<sup>-1</sup>;

$CD_{0,95}$  – значение критической разности, вычисляемое по формулам

$$CD_{0,95} = 2,77 \cdot 0,01 \cdot \bar{C}_{1,2} \sqrt{\sigma_R^2 - \sigma_r^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{1}{2n_2}\right)} \quad (11)$$

$$CD_{0,95} = 2,77 \cdot 0,01 \cdot \bar{X}_{1,2} \sqrt{\sigma_R^2 - \sigma_r^2 \left(1 - \frac{1}{2n_1} - \frac{1}{2n_2}\right)} \quad (12)$$

где 2,77 – коэффициент критического диапазона для двух параллельных определений, полученных в условиях воспроизводимости по ГОСТ ИСО 5725-6;

0,01 – множитель для перехода от процентов к абсолютным значениям;

$\bar{C}_{1,2}$  – среднеарифметическое значение результатов определений, полученных в первой и второй лабораториях, мг/дм<sup>3</sup>;

$\sigma_R$  – показатель воспроизводимости, %, (см. таблицы 6, 11 и 14);

$\sigma_r$  – показатель повторяемости, %, (таблицы 6, 11 и 14);

$\bar{X}_{1,2}$  – среднеарифметическое значение результатов определений, полученных в первой и второй лабораториях, млн<sup>-1</sup>;

$n$  – число параллельных определений.

Если критическая разность не превышена, то приемлемы оба результата определений, проводимых двумя лабораториями, и в качестве окончательного результата используют их среднеарифметическое значение. Если критическая разность превышена, то выполняют процедуры в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6 (пункт 5.3.3).

При разногласиях руководствуются ГОСТ ИСО 5725-6 (пункт 5.3.4).

## 10 Контроль качества результатов определений при реализации методов в лаборатории

10.1 Контроль качества результатов определений предусматривает:

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на основе оценки внутрилабораторной прецизионности и погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности, погрешности).

Организацию и оценку результатов контроля осуществляют в соответствии с рекомендациями [1].

10.2 Оперативный контроль погрешности (точности) результатов определений осуществляют методов добавок витаминов.

Периодичность контроля погрешности (точности) устанавливает сама лаборатория с учетом фактического состояния работ. При смене партий реактивов, экземпляров средств измерений и стандартов, проведение оперативного контроля погрешности обязательно.

10.3 Контроль стабильности результатов определений в лаборатории осуществляют по ГОСТ ИСО 5725-6 и [1], используя методы контроля стабильности стандартного отклонения промежуточной прецизионности и погрешности по ГОСТ ИСО 5725-6 с применением контрольных карт Шухарта.

Периодичность контроля и процедуры контроля стабильности результатов определений регламентируют в руководстве по качеству лаборатории в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.2).

При неудовлетворительных результатах контроля, например, при превышении предела действия или регулярном превышении предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят смену реактивов, проверяют работу оператора.

## 11 Требования безопасности и охраны окружающей среды

### 11.1 Условия безопасного проведения работ

При выполнении определений массовой концентрации (массовой доли) витаминов соблюдают следующие требования.

Требования электробезопасности при работе с приборами – по ГОСТ 12.1.019 и в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

При работе с чистыми веществами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.007.

### 11.2 Требования к квалификации операторов

К выполнению определений, обработке и оформлению результатов допускаются инженеры-химики, лаборанты, имеющие высшее или средне-специальное образование, опыт работы с данным оборудованием и знакомые с настоящим методом.





Первое применение метода в лаборатории должно проводиться под руководством специалиста, владеющего теорией высокоэффективной жидкостной хроматографии и имеющего практические навыки в этой области.

Построение градуировочной характеристики, приготовление стандартных растворов, проведение внутреннего контроля следует проводить специалисту высшей квалификации, имеющего стаж работы в данной области не менее двух лет.

## Структурные формулы (в форме оснований) водорастворимых витаминов

А.1 Структурные формулы (в форме оснований) и некоторые характеристики водорастворимых витаминов приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

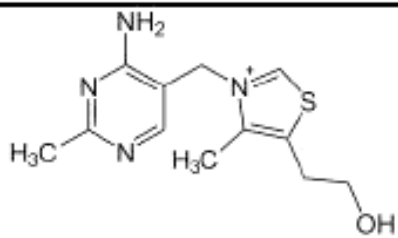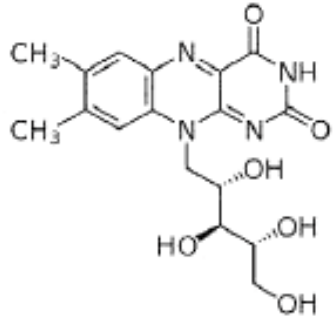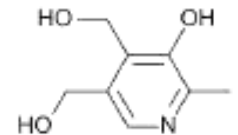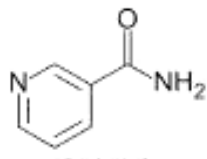Название	Молекулярная масса	Номер CAS	Структурная и молекулярная формула
Витамин В1 (Тиамин)	265,40	59-43-8	 $C_{12}H_{17}N_4OS$
Витамин В2 (Рибофлавин)	376,37	83-88-5	 $C_{17}H_{20}N_4O_6$
Витамин В6 (Пиридоксин)	169,14	58-56-0	 $C_8H_{11}NO_3$
Витамин РР (Никотинамид)	122,13	98-92-0	 $C_6H_6N_2O$



**Приложение Б  
(обязательное)**

**Методика приготовления матричного раствора**

Б.1 Матричный раствор предназначен для учета мешающего влияния фруктовых кислот и сахаров, присутствующих в пробе, подготовленной по 4.2 или 4.3, на время выхода и светопоглощение витаминов, особенно при их низких концентрациях.

**Б.2 Средства измерений, посуда и реактивы**

**Б.2.1 Средства измерений и посуда**

- весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1, специального (1-го) класса точности с наибольшим пределом взвешивания 150 г и пределом допускаемой абсолютной погрешности  $\pm 0,0005$  г;
- колба мерная 2-100-2 по ГОСТ 1770;
- стаканы В-1-100 по ГОСТ 25336.

**Б.2.2 Реактивы**

- L(-)-яблочная кислота  $C_4H_6O_5$ ;
  - кислота лимонная (моногидрат) по ГОСТ 3652;
  - сахароза по ГОСТ 5833;
  - D(+)-глюкоза по ГОСТ 6038;
  - D(-)-фруктоза;
  - сорбит  $C_6H_{14}O_6$ ;
  - вода для лабораторного анализа по ГОСТ ISO 3696 не ниже второй степени чистоты.
- Все используемые реактивы относят к подгруппе чистоты не ниже 3, квалификации ч. д. а. по ГОСТ 13867. Допускается применение других средств измерений, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также реактивов и посуды по качеству не хуже вышеуказанных.

**Б.3 Приготовление раствора**

Б.3.1 Приготовление компонентов матричного раствора для определения витаминов приведено в таблице

Б.1.

Т а б л и ц а Б.1

№ п/п	Компонент	Объем мерной колбы, см <sup>3</sup>	Масса компонента по А.2, необходимая для приготовления раствора, г	Массовая концентрация в полученном растворе, г/дм <sup>3</sup>
1	Яблочная кислота	100	(0,700 ± 0,001)	7,0
2	Лимонная кислота		(0,020 ± 0,001)	0,2
3	Сахароза		(1,500 ± 0,001)	15,0
4	Глюкоза		(2,000 ± 0,001)	20,0
5	Фруктоза		(6,000 ± 0,001)	60,0
6	Сорбит		(0,450 ± 0,001)	4,5

Б.3.2 Результаты взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Доводят объем раствора до метки водой и перемешивают.

Б.3.3 Раствор готовят при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С.

Срок хранения раствора в холодильнике при температуре не более 4 °С – в течение одной недели.

Примеры типовых хроматограмм и УФ-спектры поглощения витаминов  
в обогащенной соковой продукции

В.1 Примеры типовых хроматограмм и УФ-спектры поглощения витаминов в обогащенной соковой продукции приведены на рисунках В.1 – В.7.

Поглощение, AU

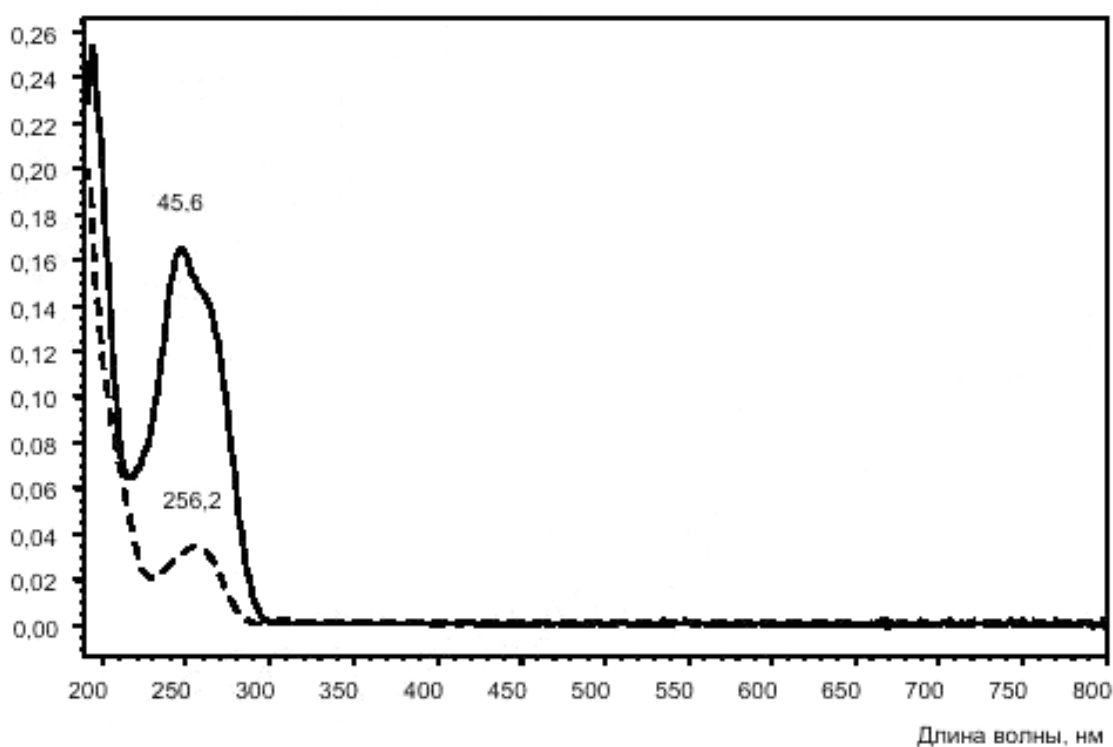


Рисунок В.1 – УФ-спектр витамина В<sub>1</sub>, сдвиг максимума абсорбции за счет матричного влияния


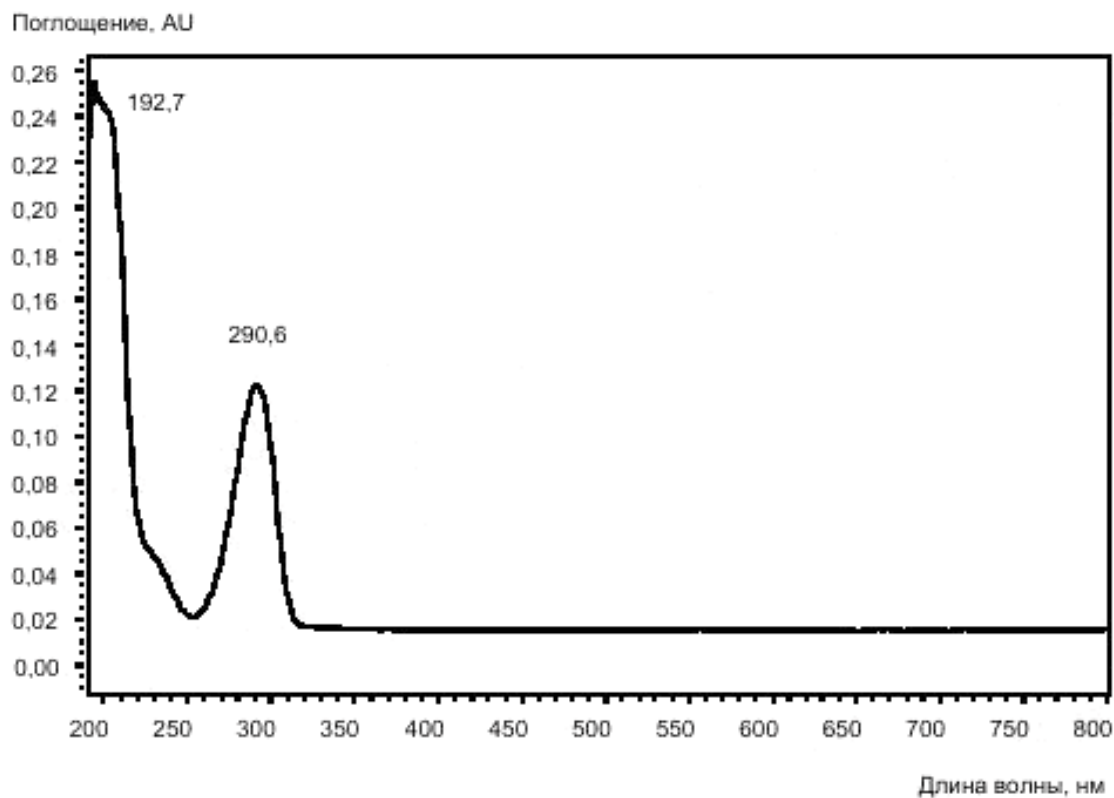
Рисунок В.2 – УФ-спектр витамина В<sub>6</sub>

Рисунок В.3 – УФ-спектр витамина РР

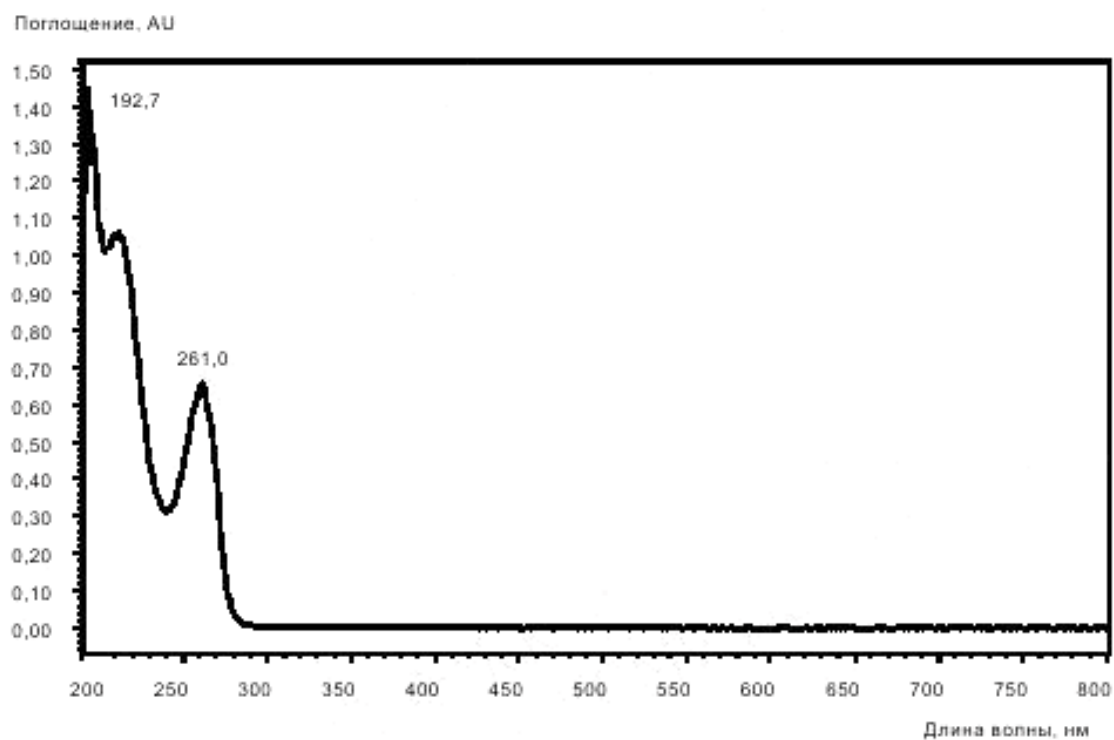

Поглощение, AU

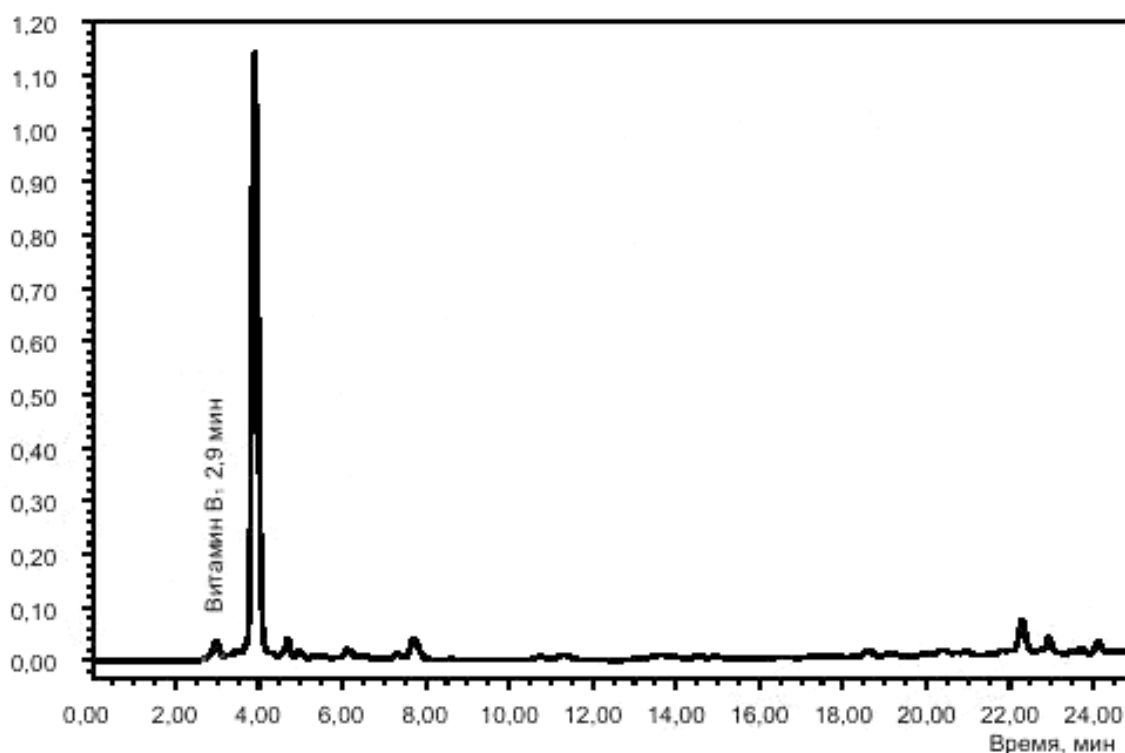


Рисунок В.4 – Хроматограмма нектара из яблок, черноплодной рябины и черной смородины, обогащенного витаминами и минеральными веществами с выделенным хроматографическим пиком витамина В<sub>1</sub>

Поглощение, AU

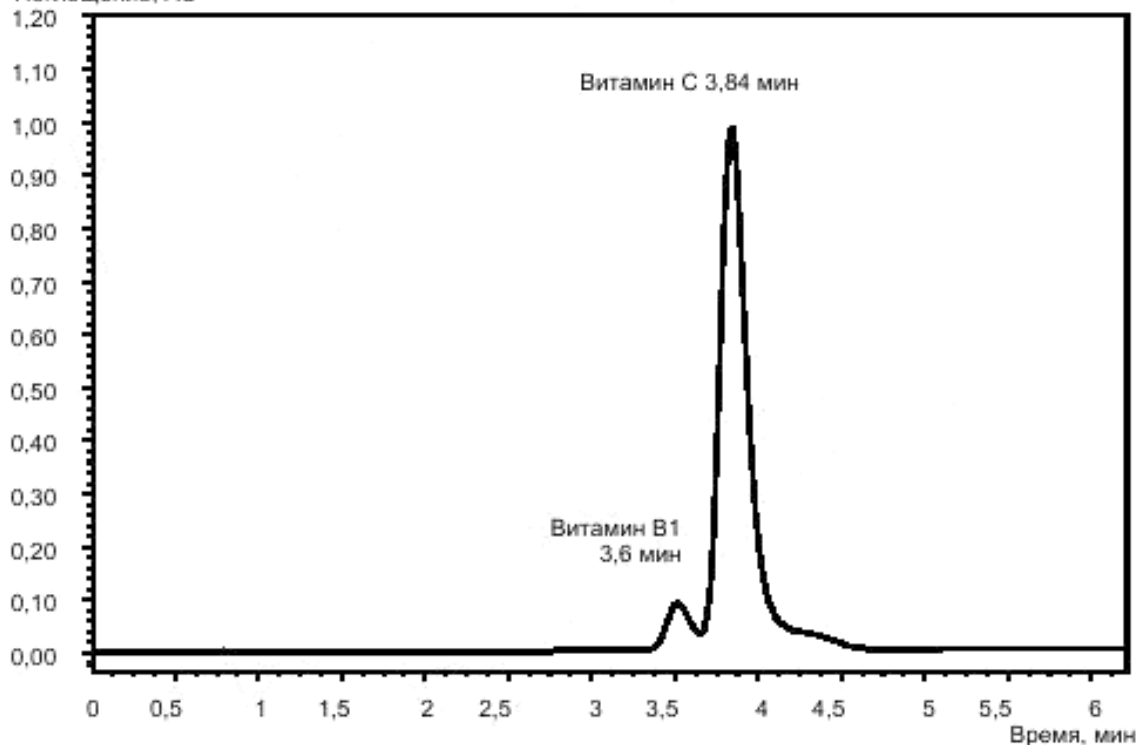


Рисунок В.5 – Фрагмент хроматограммы витаминного премикса с хроматографическими пиками витамина В<sub>1</sub> и витамина С, оказывающего мешающее влияние на определение витамина В<sub>1</sub> в случае спектрофотометрического детектирования

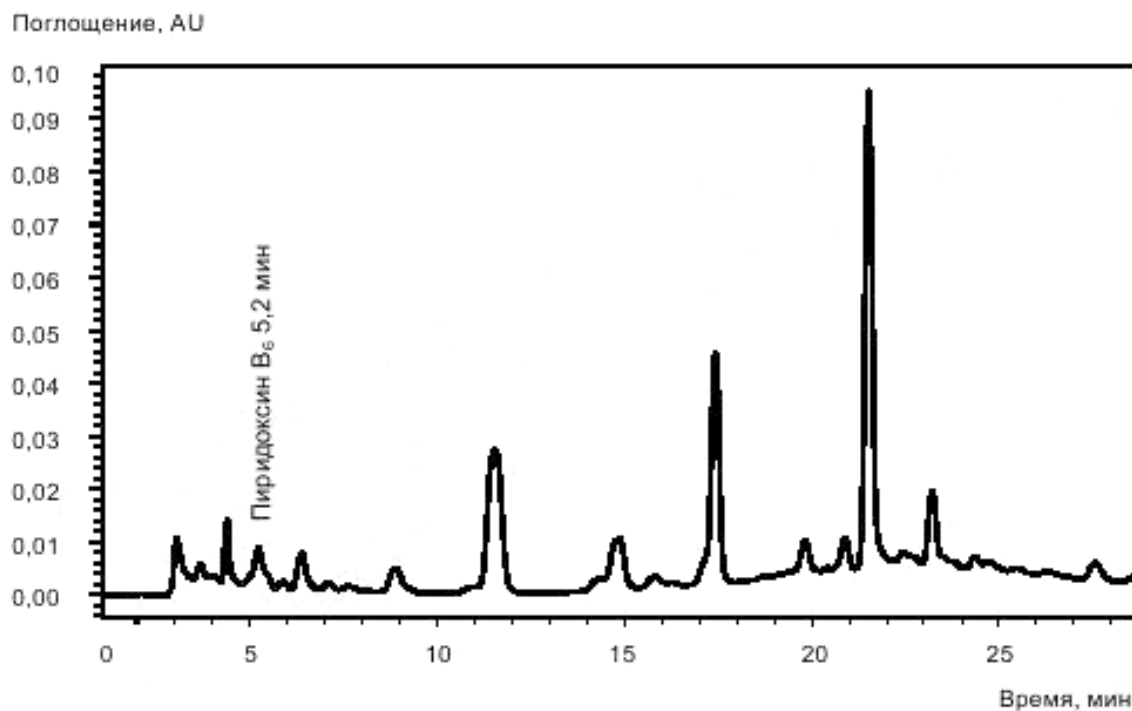


Рисунок В.6 – Хроматограмма нектара из яблок, черноплодной рябины и малины, обогащенного витаминами и минеральными веществами с хроматографическим пиком витамина B<sub>6</sub>

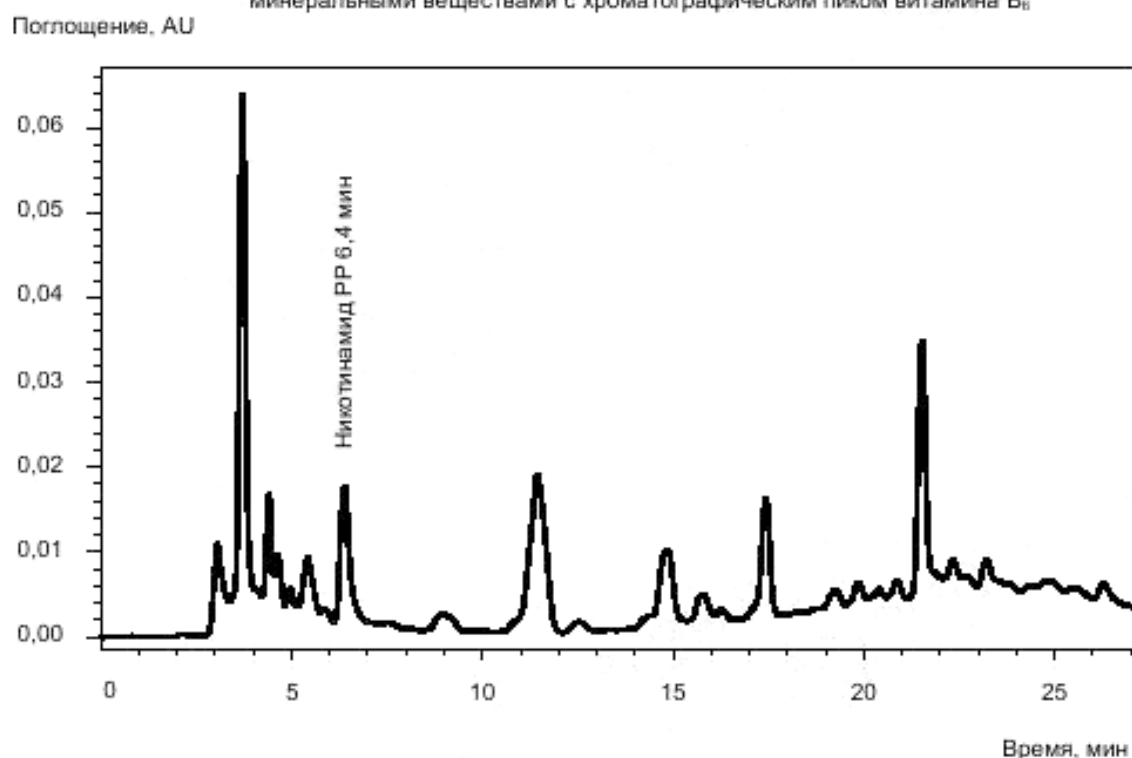


Рисунок В.7 – Хроматограмма нектара из яблок, черноплодной рябины и черной смородины, обогащенного витаминами и минеральными веществами с хроматографическим пиком витамина PP

Приложение Г  
(обязательное)

## Определение эффективности хроматографической колонки

Проверку оптимальности выбранных хроматографических условий (характеристик колонки) проводят по основным характеристикам, приведенным в таблицах Г.1 – Г.3 с применением рабочего градуировочного раствора № 4.

Т а б л и ц а Г.1 – Основные характеристики разделения витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>6</sub>, РР

Витамин	Время удерживания $t_R$ , мин	Число теоретических тарелок $N$	Коэффициент емкости $k'$	Разрешение $R_s$
Тиамин (В <sub>1</sub> )	3,6 ± 0,2	5184	0,24	0,36*
Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	5,7 ± 0,3	472	0,97	1,95
Никотинамид (РР)	7,0 ± 0,4	544	1,41	1,16

П р и м е ч а н и е – Разрешение хроматографического пика для витамина В<sub>1</sub> дано по отношению к витамину С (см. рисунок В.5), который определяют по ГОСТ 31643. Для остальных витаминов – разрешение дано по ближайшему пику.

Т а б л и ц а Г.2 – Основные характеристики разделения витамина В<sub>1</sub>

Компонент	Время удерживания $t_R$ , мин	Число теоретических тарелок $N$	Коэффициент Асимметрии, $A_s$
Тиамин (В <sub>1</sub> )	5,05 ± 0,25	7226	1,1

Т а б л и ц а Г.3 – Основные характеристики разделения витаминов В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub>

Компонент	Время удерживания $t_R$ , мин	Число теоретических тарелок $N$	Коэффициент асимметрии $A_s$
Пиридоксин (В <sub>6</sub> )	5,00 ± 0,25	6471	0,99
Рибофлавин (В <sub>2</sub> )	24,0 ± 1,2	113771	0,72

Время удерживания соответствующего компонента определяют непосредственно из хроматограмм двух параллельных измерений.

В случае обнаружения отклонения времени удерживания более чем на 5 % для любого из витаминов, строят новую градуировочную зависимость во всем диапазоне измерений.

Число теоретических тарелок вычисляют по формуле

$$N = 16 \cdot \left( \frac{t_R}{W_b} \right)^2, \quad (\text{Г.1})$$

где  $t_R$  – время удерживания пика витамина В<sub>1</sub>, мин;

$W_b$  – ширина пика витамина В<sub>1</sub> у основания, мин.

Колонка считается удовлетворительной при значении числа теоретических тарелок не ниже 10 % от указанного в таблице.

Разрешение между двумя хроматографическими пиками  $R_s$  вычисляют по формуле

$$R_s = \frac{2 \cdot (t_{R2} - t_{R1})}{W_{b1} + W_{b2}}, \quad (\text{Г.2})$$

где  $t_{R2}$  – время удерживания витамина С, мин;

$t_{R1}$  – время удерживания витамина В<sub>1</sub>, мин;

$W_{b1}$ ,  $W_{b2}$  – ширина пика витамина С и витамина В<sub>1</sub> у основания, мм.

Колонка считается удовлетворительной при значениях  $R_s \geq 0,34$ .

Коэффициент емкости вычисляют по формуле

$$k' = \frac{t'_R}{t_M}, \quad (\text{Г.3})$$

где  $t'_R$  – приведенное время удерживания витамина В<sub>1</sub>, мин;

$t_M$  – мертвое время удерживания витамина В<sub>1</sub>, мин.

Колонка считается удовлетворительной при значении коэффициента емкости, не превышающем 10 % от указанного в таблице.

При невозможности достижения требуемых условий эффективности хроматографического разделения проводят определение других хроматографических колонок аналогичным образом.

Контроль эффективности хроматографического разделения проводят не реже одного раза в месяц.



**Приложение Д**  
**(рекомендуемое)**

**Порядок кондиционирования хроматографической колонки**

Д.1 Общая схема кондиционирования системы перед выводом на рабочий режим сводится к следующему<sup>\*</sup>:

- насос системы промывают рабочим элюентом (если система была под другим элюентом, насос переключают в соответствии с совместимостью растворителей);
- на колонку подают раствор дигидрофосфата калия, приготовленный по 6.3.4, со скоростью 0,10 см<sup>3</sup>/мин до установления постоянного давления;
- скорость потока постепенно увеличивают с шагом 0,1 см<sup>3</sup>/мин, с установлением постоянного давления после каждого прибавления до 1,0 см<sup>3</sup>/мин;
- перед первым измерением с помощью программного обеспечения, в соответствии с руководством пользователя выполняют операции в соответствии с таблицей Д.1.

Т а б л и ц а Д.1 – Порядок вывода хроматографа на рабочий режим

№ пп	Выполняемая операция	Время, мин
1	Промывка инжектора	6,5
2	Ввод образца с нулевым объемом или «холостая инъекция» <sup>*</sup>	15,0
3	Уравновешивание колонки	5,0

<sup>\*</sup> В зависимости от конструктивных особенностей хроматографической системы выполняют ввод образца с нулевым объемом (программная функция) или «холостое инжентирование» – ввод 20 мм<sup>3</sup> подвижной фазы по 6.3.4.

Выполнение данной операции осуществляют с использованием условий, указанных в таблице Д.2.

Т а б л и ц а Д.2 – Профиль градиента при холостом определении

Время, мин	Скорость потока подачи элюента, см <sup>3</sup> /мин	Состав подвижной фазы (элюента), массовая доля, %	
		Раствор дигидрофосфата калия	Ацетонитрил
0	1	96,0	4,0
2		80,0	20,0
7		80,0	20,0
9		96,0	4,0
15		96,0	4,0

Д.2 Выключение хроматографической системы проводят в соответствии с руководством по эксплуатации,

при этом:

- скорость потока подвижной фазы снижают до 0,1 см<sup>3</sup>/мин и затем подачу останавливают;
- насос промывают водой;
- колонку отмывают водой при скорости (0,5–1,0) см<sup>3</sup>/мин в течение 30 мин и выключают прибор.

<sup>\*</sup> Данную операцию выполняют с целью уравновешивания сорбента колонки.

Библиография

[1] РМГ 76-2004

Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

---

УДК 664.863.001.4:006.354

МКС 67.050

Н59

67.080

Ключевые слова: соковая продукция, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащая продукция, фруктовые и овощные соки концентрированные, витамины, массовая доля, массовая концентрация ВЭЖХ

---

Подписано в печать 01.11.2014. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.

Усл. печ. л. 3,26. Тираж 36 экз. Зак. 4976

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)